

**GUÍA RÁPIDA MONITOR MINDRAY  
SERIE iMEC 8/10/12  
GENERALIDADES  
Componentes del sistema**




1. Botón de Encendido: Para encender o apagar el equipo. Para apagar el monitor, mantenga la tecla pulsada por más de dos segundos.
2. LED de alimentación de CA: se enciende cuando la alimentación de CA está conectada.
3. LED de batería:
  - Encendido: Cuando la batería está instalada y la fuente de CA está conectada.
  - Apagado: cuando la batería no está instalada, la batería instalada no funciona correctamente no hay conectada ninguna fuente de CA a apagar el monitor.
  - Parpadeo: cuando el monitor de paciente funciona con la batería.
4. Luz de Alarma: cuando se produce una alarma fisiológica o técnica, esta luz parpadeará como se define a continuación.


- Nivel Alto: la luz parpadea rápidamente en rojo.
- Nivel Medio: la luz parpadea de forma lenta en amarillo.
- Nivel Bajo: la luz se ilumina en amarillo sin parpadear.

5. Botón SILENCE: Presionar este botón para silenciar o borrar las alarmas del monitor.
6. Botón ALARM PAUSE: Presionar esta tecla para poner en pausa o restaurar alarmas.
7. Botón FREEZE: En modo normal, presione para congelar todas las formas de onda en la pantalla.
8. Perilla Giratoria: Al utilizar la perilla, gire el botón para resaltar un elemento y presione para seleccionar dicho elemento.
9. Botón MENU: Presione para abrir el menú del sistema.
10. Botón RECORD: Presione para iniciar una grabación en tiempo real. Pulse de nuevo para detener la grabación actual.
11. Botón NIBP: Presione para inflar el brazal e iniciar la medición de presión.

**En el panel lateral (iMEC10/iMEC12)**

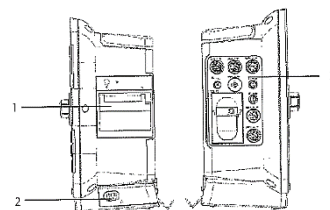


**En el panel lateral (iMEC8)**

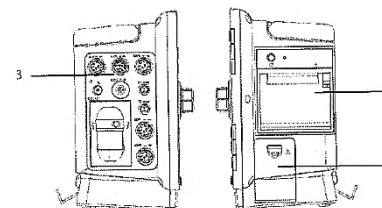


1. Registrador
2. Compartimiento de la Batería
3. Conectores para Parámetros.

**En el panel trasero (iMEC10/iMEC12)**

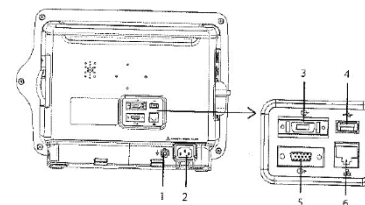

**En el panel trasero (iMEC8)**

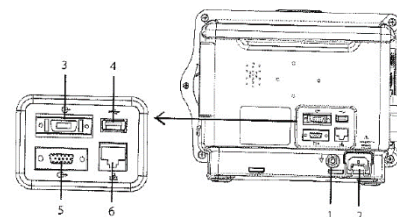

1. Terminal de masa equipotencial
2. Entrada de alimentación de CA.
3. Conector multifunción
4. Conector USB
5. Conector VGA

6. Conector de Red.

**Uso del equipo:**

- Presione el botón de encendido. Sonará un tono.
- El sistema iniciará la autocomprobación y aparecerá el modelo del equipo en pantalla.
- Transcurridos unos segundos, el sistema finalizará la autocomprobación y mostrará la pantalla principal.
- Conecte los accesorios del equipo al paciente y observe que se visualicen todas las señales en el equipo (ECG, NIBP, SPO2, Respiración, IP, CO2).
- Configure la frecuencia en la medida de presión no invasiva e inicie la medición.
- Desconecte los cables y sensores del monitor el paciente una vez no sea necesario.
- Decida si almacenar o borrar los datos de monitorización del paciente.
- Para apagar el monitor asegúrese de que la monitorización del paciente debe terminar.
- Pulse el interruptor de encendido durante más de dos segundos para apagar el monitor.